


Dépistage organisé du cancer colorectal : **l'Hemoccult II® est-il obsolète?**

E Dorval
CHRU de Tours

Le dépistage organisé du CCR utilise le test Hemoccult II®

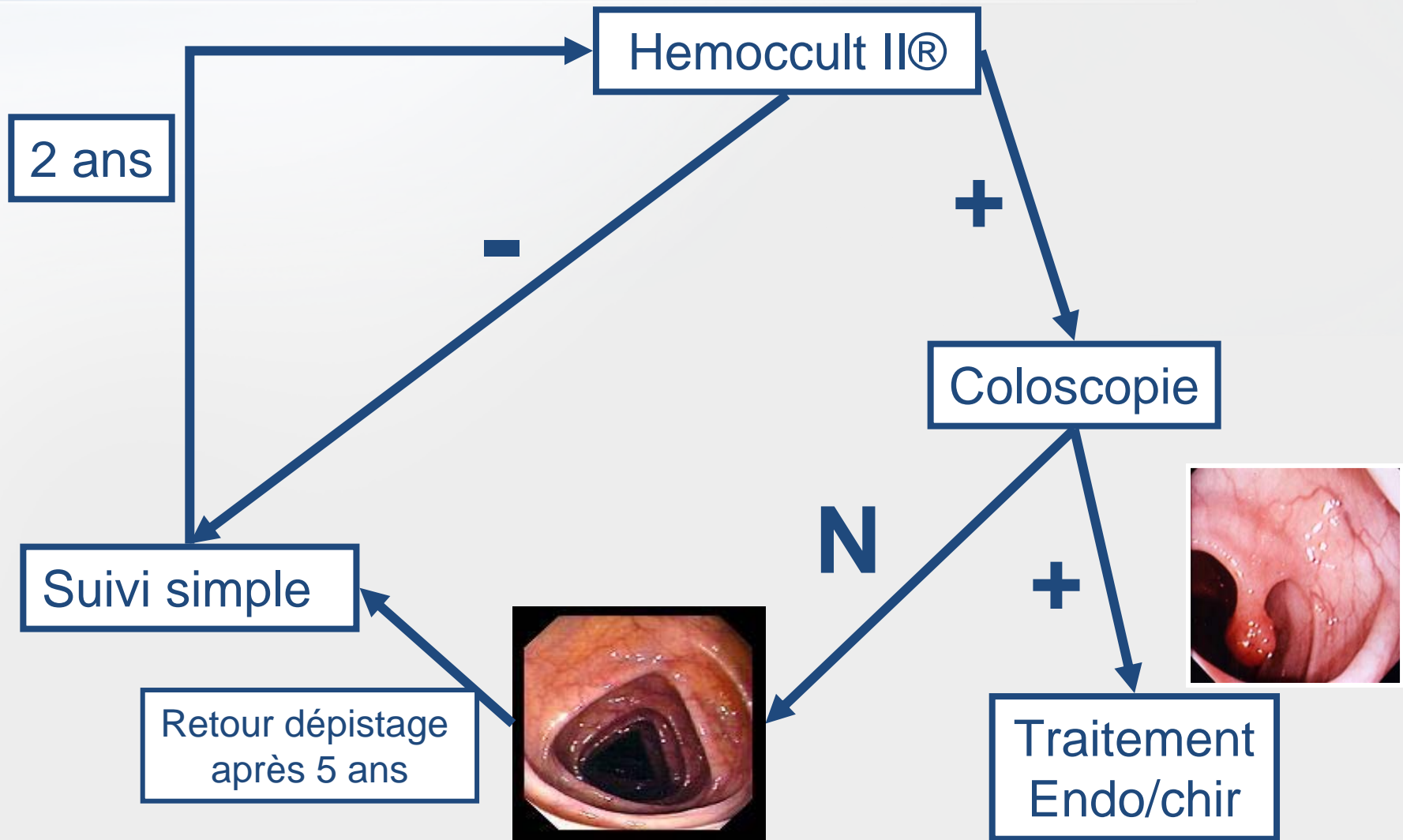

L'Hemoccult II®

➤ est un test au gaïac dont on connaît les caractéristiques

activité peroxydasique de l'hème
seuil # 1 mg d'Hb/g selles

➤ de même que les performances en population à risque moyen (50-75 ans sans symptômes ni ATCD CCR) :

tests positifs # 2-3%

sensibilité cancer # 35-50%

spécificité # 98%


VPP cancer et ad # 40-50%

mortalité #-15% pour une participation de 50%



**Prélever 2 fois
1 «lentille»
sur 3 selles consécutives.**

Facteurs concourants à l'(in)efficacité du dispositif

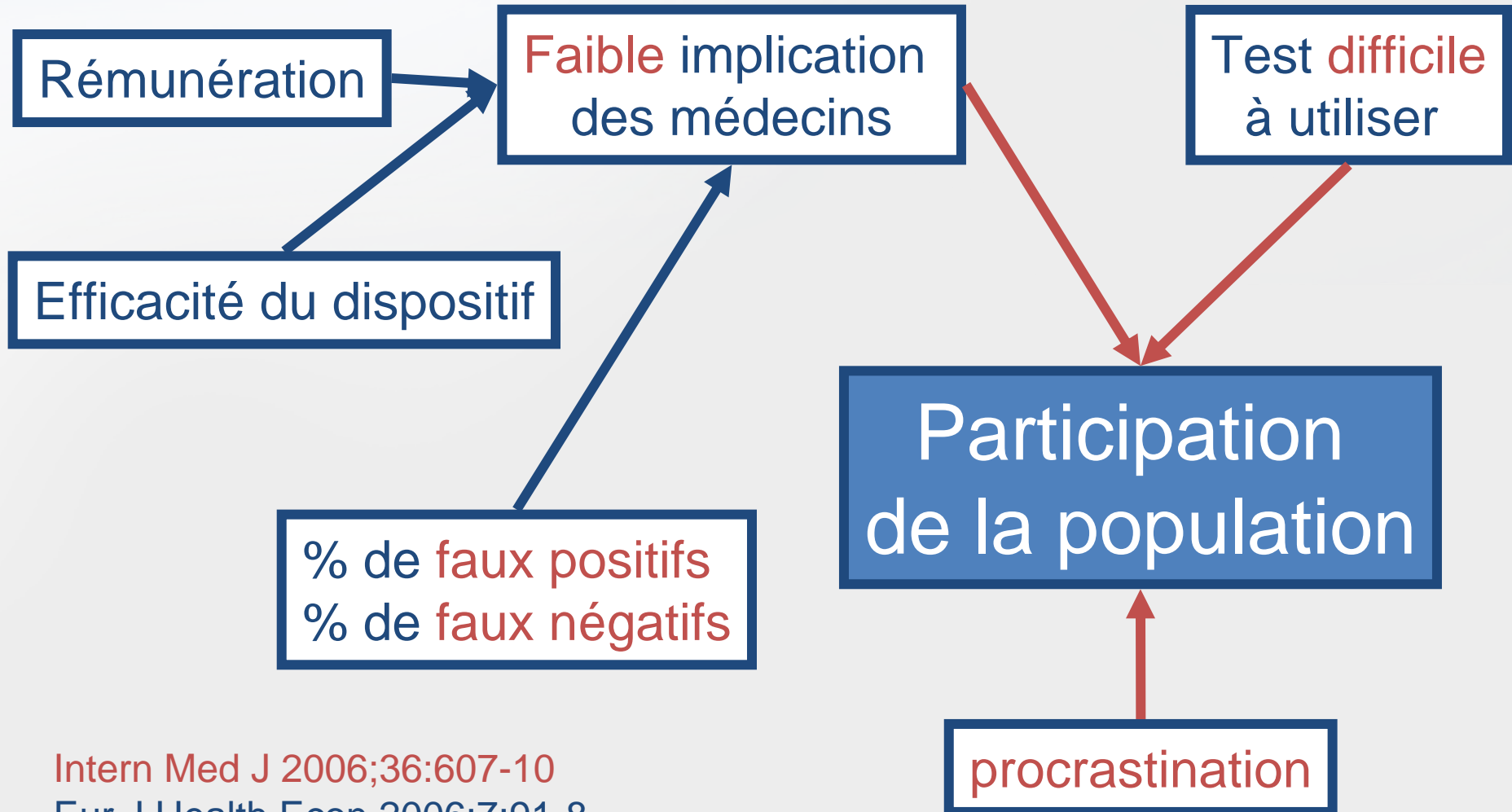

Facteurs concourants à l'(in)efficacité du dispositif

Test de dépistage
Facile d'emploi
Fiable

Test **difficile**
à utiliser

% de **faux positifs**
% de **faux négatifs**

Participation
de la population

procrastination

Hemoccult II® obsolète?

Limites à l'efficacité

- Performances test
 - Sensibilité « faible »
 - Non spécifique Hb humaine
 - Lecture «manuelle» et opérateur dépendante
- Participation au test
 - Régime alimentaire
 - Manipulation des selles (répétée X 3)

Avantages et remèdes

- Fiabilité adaptée au dépistage
 - Répétition du test
 - Grande spécificité CCR
 - Centres de lecture agréés
- Emploi facilité
 - Régime inutile
 - « Mode d'emploi »

Autres tests ou modalités de recherche
de sang dans les selles

Auto tests au gaïac

Tests Immunologiques

Nombre de prélèvements

Autotests au gaïac

- Pas de prélèvement de selles
 - Pas de régime
 - Auto lecture
- = emploi facile...**


Hemocheck®

Colocare®


Coloscreen®

EZ Detect®...

Principe des autotests au

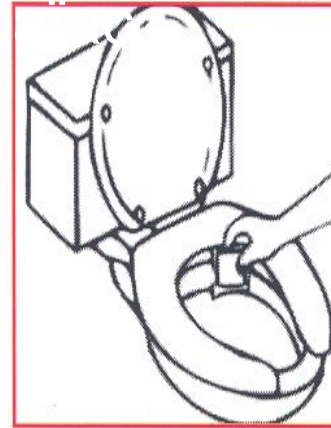

Après être allé à la selle, jeter un feuillet test dans la cuvette

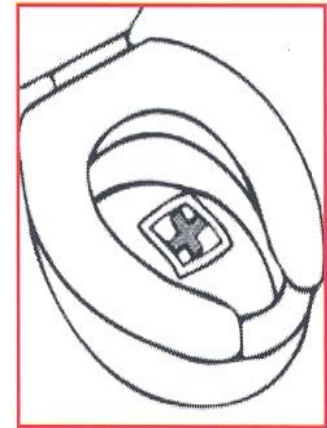

En présence de sang, la croix située au centre du feuillet se colore en bleu-vert dans les 2 minutes.

Autotests au gaïac

Pas de prise en charge
par l'assurance maladie
Non retenus dans la campagne
nationale de dépistage organisé du
cancer colorectal...

Foliente 1995 : **62% interprétation jugée délicate ou difficile**

Les tests immunologiques

- Spécifiques du sang : AC anti Hb humaine
- Pas de régime
- lecture non opérateur dépendante
- Lecture par automate possible :
 - Insure® Enterix,
 - Magstream® Fujirebio,
 - OC-Micro® Eiken
- Résultat quantitatif possible

Tests immunologiques : Se et sp

Test	Se %	Sp %	% +
HemeSelect® vs Hemoccult II®	67 vs 32	95 vs 98	5.9 vs 2.5
Flexsure ® vs Hemoccult II® Greenberg Am J Gastroenterol 2000	51 vs 38	88 vs 94	15.9 vs 9.4
Insure ® vs Hemoccult Sensa® Smith. Cancer 2006	87 vs 54	96.6 vs 97.5	5.6 vs 4.0 [2 prélèv.]

Au seuil de positivité du fabricant, les tests immunologiques sont plus sensibles mais moins spécifiques que les tests au gaïac ce qui conduit à une augmentation du nombre de faux positifs, donc de sujets soumis à une coloscopie inutile.

positivité

[OC Micro® Eiken].

Fecal Hb ng/ml 1000 Pts	Se % Ca+AA N=91/1000	sp % Ca+AA	Se % Ca N=17/1000	sp % Ca
50	72.5	88.6	100	84.4
75	67	91.4	94.1	87.5
100	61.5	93.3	88.2	89.7
125	53.8	94.6	82.4	91.5
150	53.8	95	82.4	91.9

Tests immunologiques : seuils de positivité

[OC Micro® Eiken].

Fecal Hb ng/ml 1000 Pts	Se % Ca+AA N=91/1000	sp % Ca+AA
50	72.5	88.6
75	67	91.4
100	61.5	93.3
125	53.8	94.6
150	53.8	95

Quel seuil choisir?

Hemoccult II®

Se Ca+Ad

40-50%

sp Ca+Ad

98%

Régime et Nb prélèvements : acceptabilité

Test	Régime	Nb prélèv. selles	% participation		
Gaïac	OUI	3 spatule	23.4		
Immuno	NON	3 spatule	30.5	+28 %	+66 %
Immuno	NON	2 brosse	39.6	+30 %	

En résumé

Les **tests immunologiques** ont comme avantages **possibles** sur l'Hemoccult II® :

- simplification du prélèvement des selles
- meilleure performance
- automatisation de l'analyse...

...tout en maintenant la même stratégie de dépistage organisé en 2 temps (sélection puis coloscopie) de préférence à coloscopie courte, totale ou virtuelle d'emblée.

En résumé

- Le seuil de positivité des tests quantitatifs et
- Le nombre de prélèvements de selles restent à fixer.

Ce sont des choix cruciaux pour améliorer l'efficacité du dépistage si le test est en effet :

- mieux accepté par la population
 - plus fiable et performant (Se, sp, VPP)
 - et acceptable économiquement.
- La poursuite de travaux est donc indispensable.
 - Dans l'attente l'Hemoccult II® reste la seule référence pour le « DO » du « CCR ».